



LOUPES CARBON X

Conçues pour soulager votre cou et vos épaules

Importateur exclusif

Résidence de Virgile - B4
18 rue de la Duchesse de Chartres
60 500 Vineuil-Saint-Firmin

Mobile: +33 (0) 611 417 010

mail: contact@nf-diffusion.com


Conception ergonomique

Conception optique à 48 degrés

Angle vers le bas à 48 degrés

Maintiennent une posture droite du dos et du cou

Evite de ce se pencher en avant.

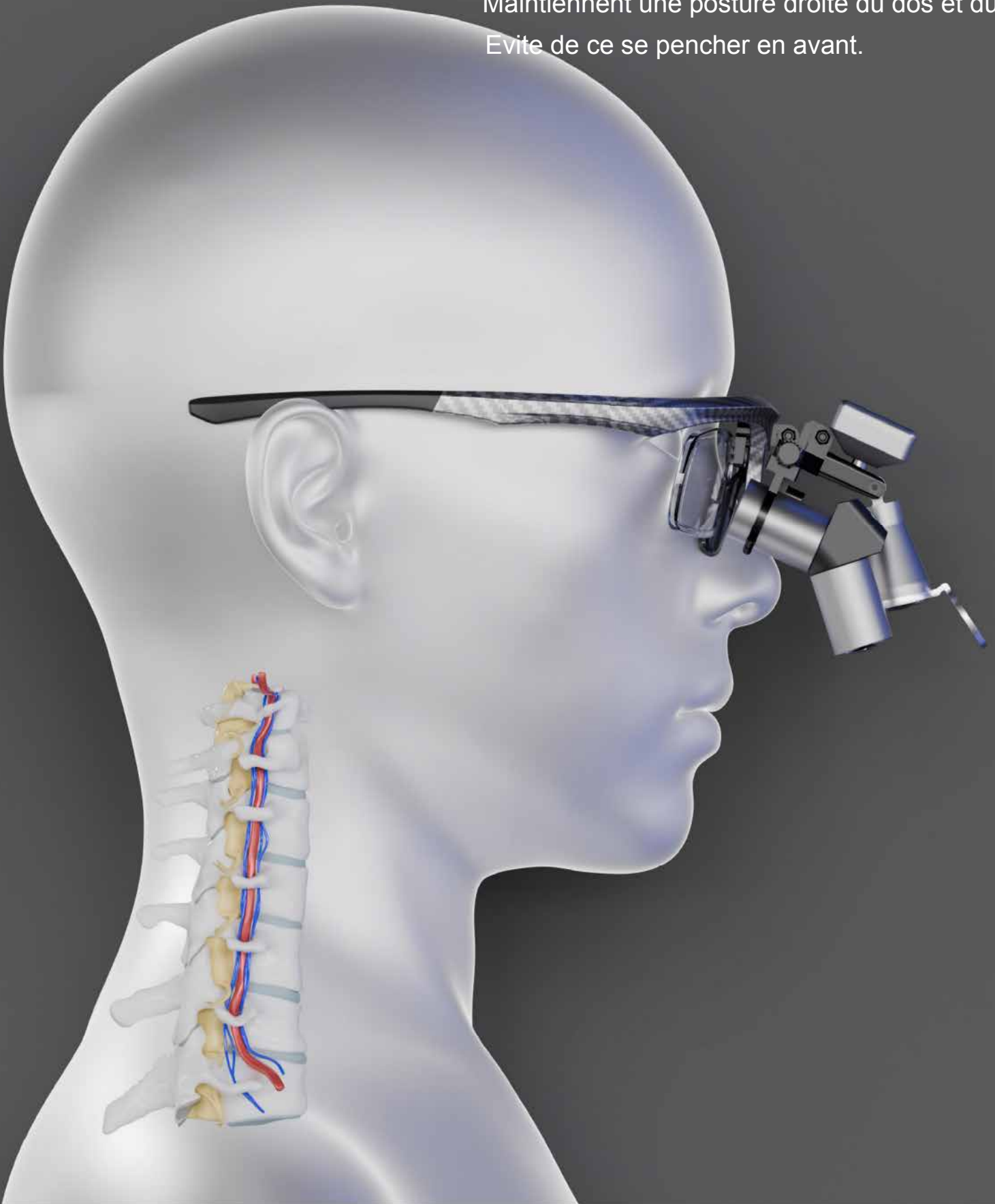

Éliminent le besoin de se pencher

Réduisent la tension des épaules et du cou

Prolongent votre santé physique







Aucune personnalisation nécessaire
Réglables librement


Grossissement 3,5 X à 6,5X, avec un champ de vision allant jusqu'à 90 mm
Observez facilement chaque détail dans la cavité buccale
possibilité de mettre un insert correctif (Option)

Réglage indépendant de la distance interpupillaire gauche et droite Alignement facile des images

Réduisent la fatigue oculaire due aux chirurgies longues

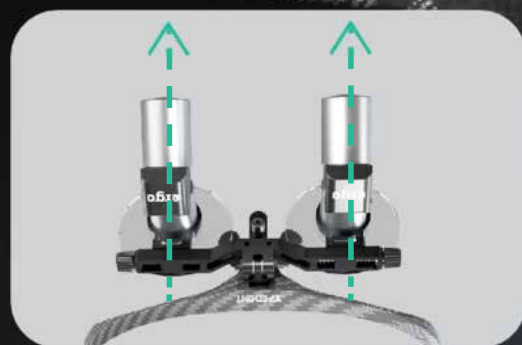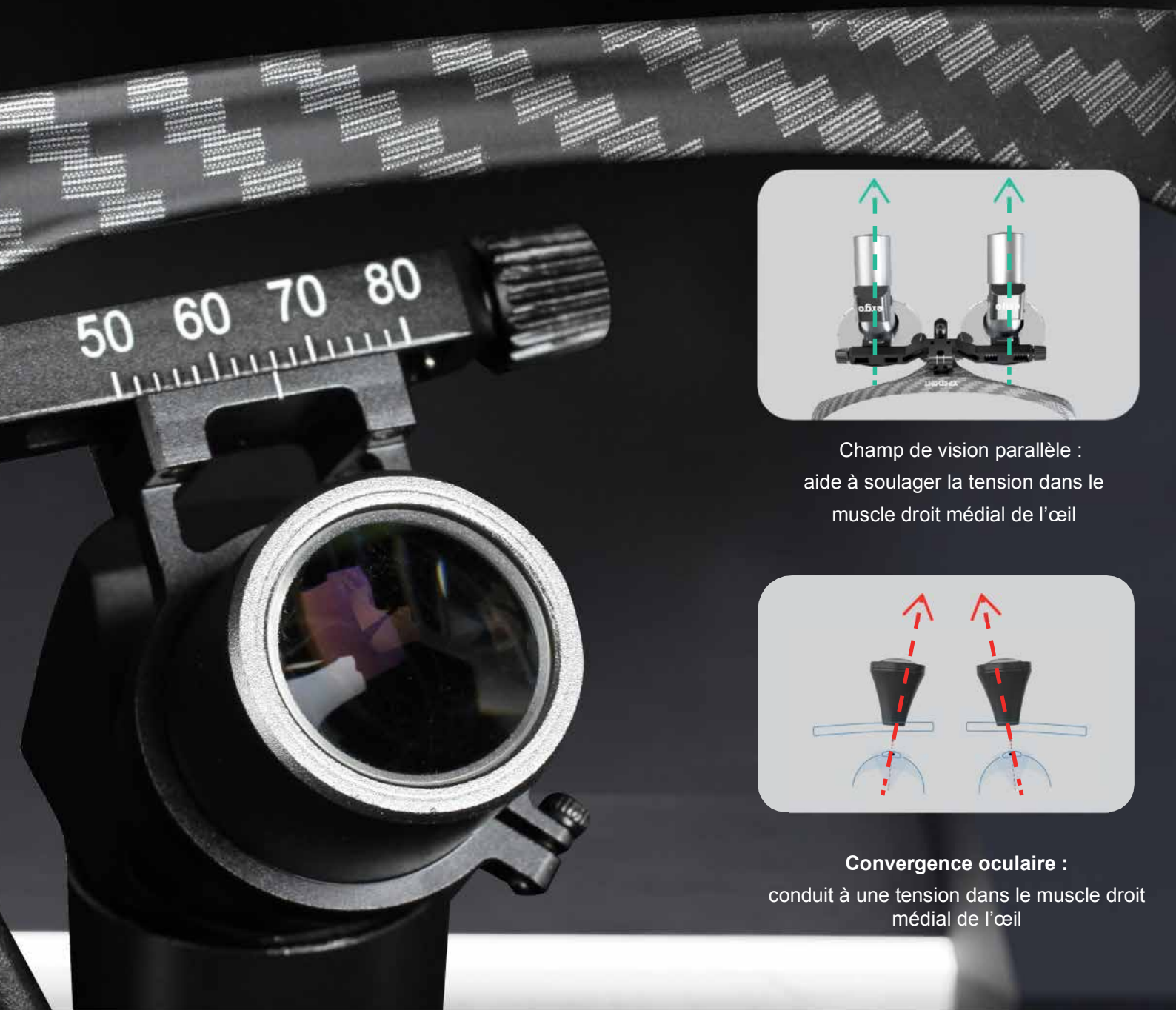


Champ de vision parallèle :
aide à soulager la tension dans le
muscle droit médial de l'œil

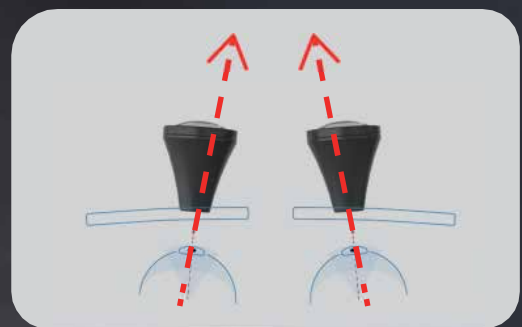

Convergence oculaire :
conduit à une tension dans le muscle droit
médial de l'œil

**Retournement
facile pour une vue
dégagée**

Communication entre médecin et patient améliorée

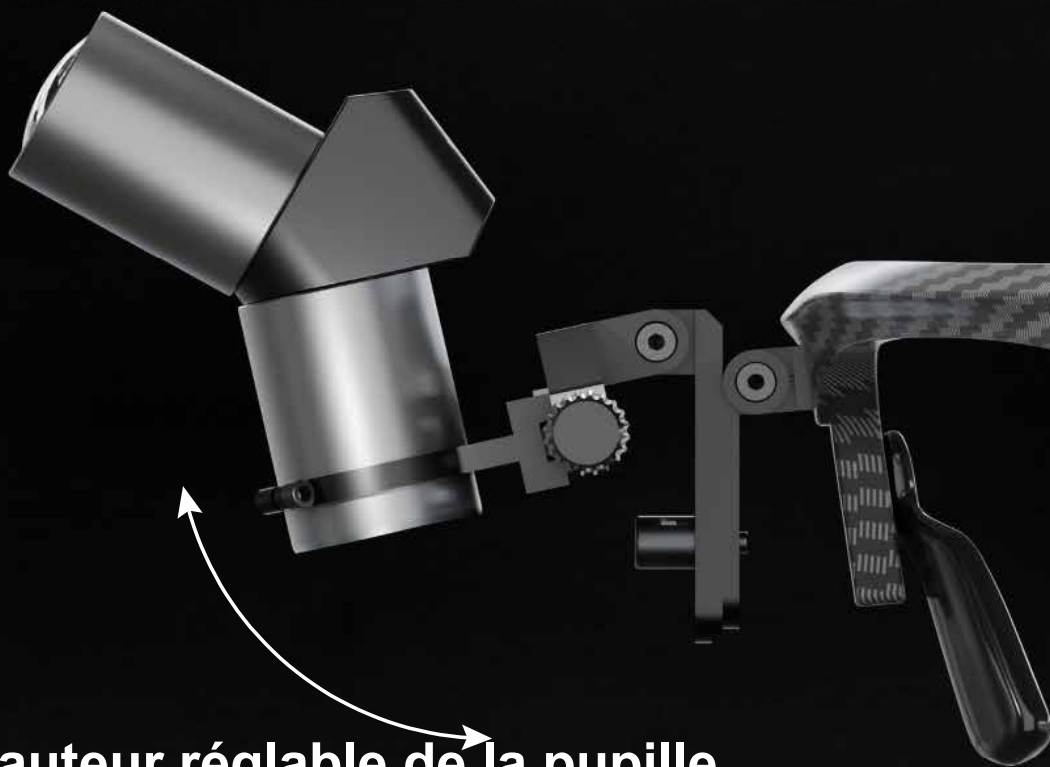

Hauteur réglable de la pupille

Assurent une vue sans ombre





Plaquettes nasales souples en silicone pour plus de confort

Bande métallique pliable intégrée pour un réglage facile et un ajustement adéquat sur l'arête du nez

**Les lentilles sont dotées d'un verre
SCHOTT avec une technologie de
revêtement anti-buée et anti-moisissure**

Vision claire avec des contours nets





Remplacement facile des lentilles de prescription

Fixation rapide et sûre par clipsage



Grossissement	Distance de travail	Réglage de la distance pupillaire	Profondeur de champ	Champ visuel	Poids
3,5 X	280-380 mm	50-80 mm	100 mm	70-90 mm	75 g
4,5 X	360-460 mm		100 mm	50-80 mm	80 g
5,5 X	440-540 mm		90 mm	50-75 mm	88 g
6,5 X	500-600 mm		80 mm	45-70 mm	87 g